


MICROGUIA HYBRID

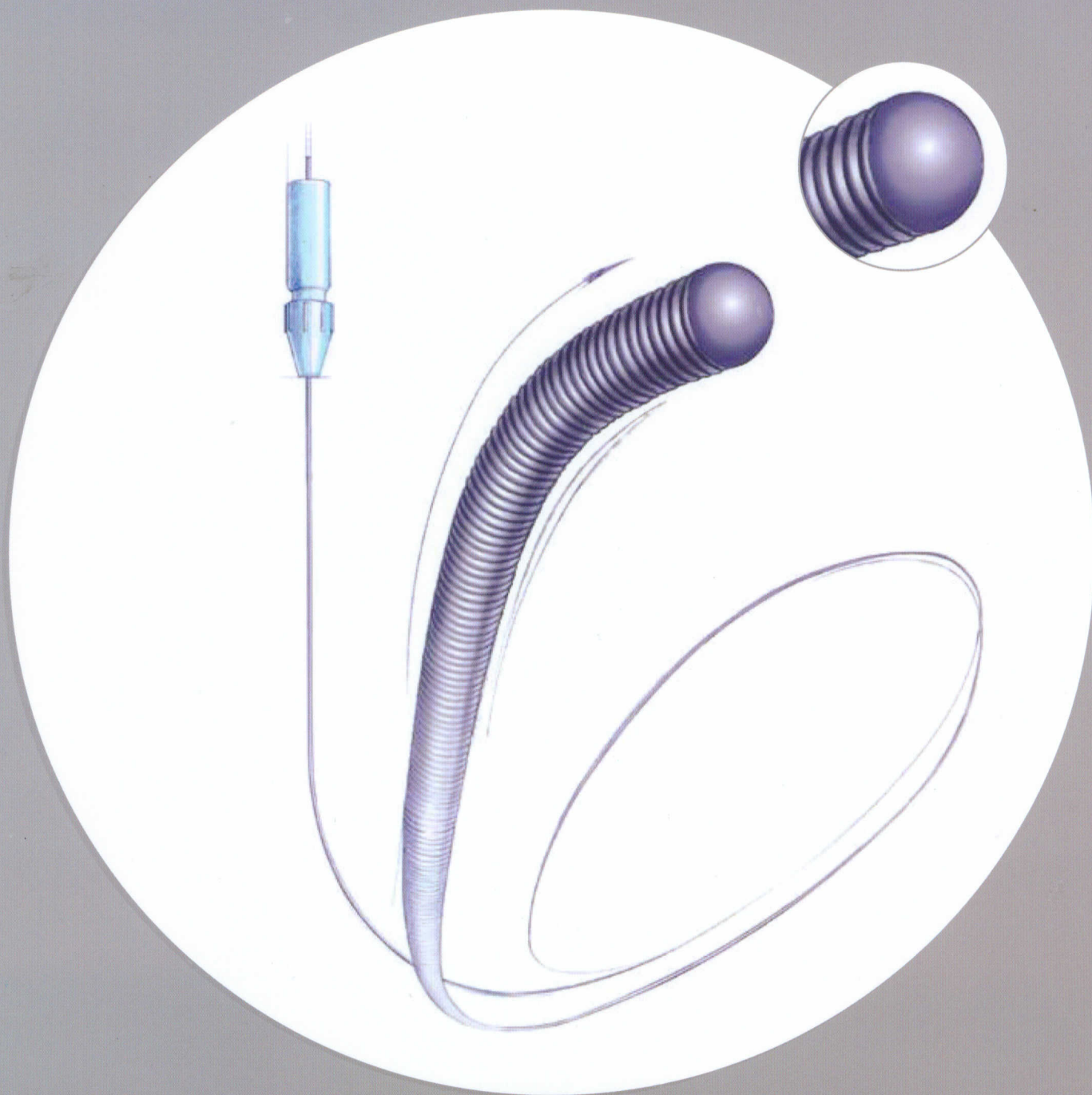

MICROGUIA HYBRID


CARACTERÍSTICAS

- Parte proximal de aço inoxidável: para torque e suporte
- Parte distal de Nitinol para flexibilidade, navegabilidade sem deformação do molde de sua ponta
- Ponta distal facilmente moldável

Sua extremidade distal tem 2 cm de comprimento que permite moldá-lo.

D = straight


HYBRID007D & HYBRID008D

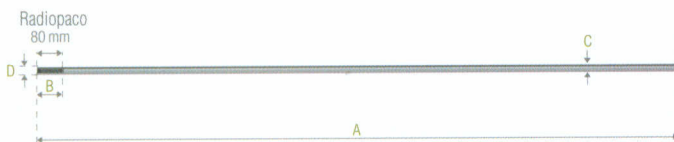

A • 2200mm
B • 80mm

C • .012" (0,30 mm)
D • .007" (0,18 mm)
• .008" (0,20 mm)

HYBRID1214D

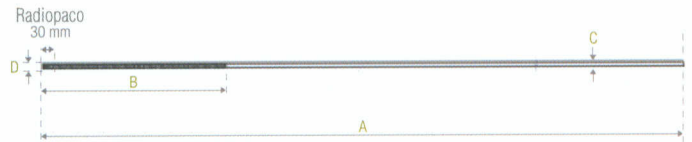

A • 2000mm
B • 310mm

C • .014" (0,35 mm)
D • .012" (0,30 mm)

COMPATIBILIDADE

REFERÊNCIA	COMPATÍVEL COM
HYBRID007D	SONIC 1.2F • MAGIC 1.2F • e microcateteres com diâmetro interno maior
HYBRID008D	SONIC 1.5F • MAGIC 1.5F • MAGIC 1.8F
HYBRID1214D	VASCO+10 • VASCO+18 • VASCO+21 • ECLIPSE • COPERNIC • ECLIPSE 2L • COPERNIC 2L
HYBRID10D300	Guia de troca para ECLIPSE - COPERNIC – e todos os microcateteres
HYBRID12D300	

💡 Sua ponta distal flexível faz com que seja uma ótima guia de troca ideal, pois diminui o risco de lesões traumáticas do vaso.