


VASCO PLUS

MICROCATETER ARAMADO

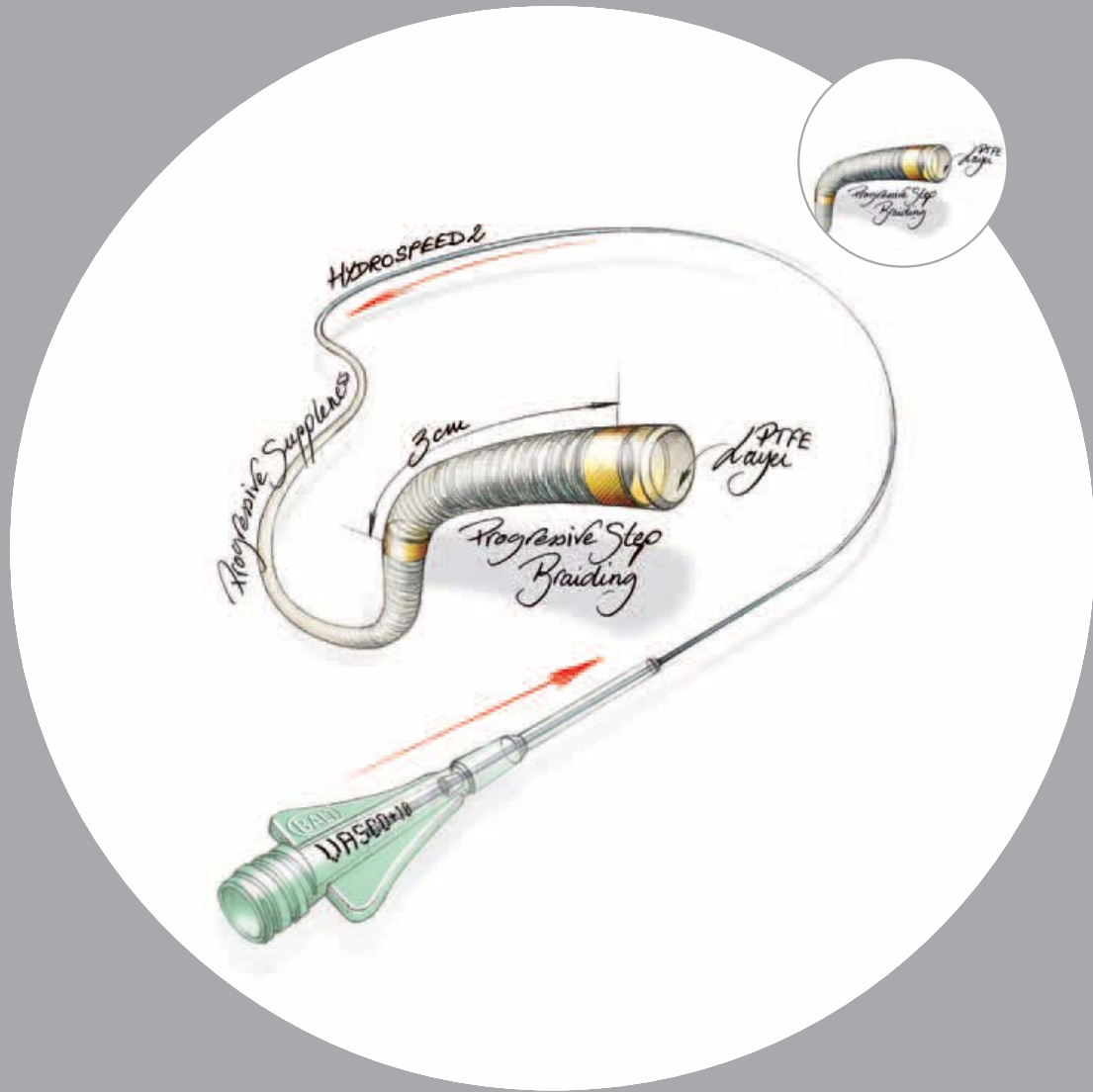


VASCO PLUS

MICROCATETER ARAMADO

O aramado progressivo presente em todo comprimento do microcateter, fornece uma excelente estabilidade, enquanto a sua variação de flexibilidade associada ao seu revestimento hidrofílico melhora sua navegabilidade. A Balt possui uma vasta gama de microcateteres Vasco+ para variadas aplicações:

- **VASCO+10** para navegação de molas de platina sistema 10 e 18;
- **VASCO+18** para navegação de molas “ativas” com grandes diâmetros e navegação do dispositivo para retirada de trombos Catch+;
- **VASCO+21 ao VASCO+35** para navegação dos stents Leo+, Silk e injeções de partículas;
- **VASCO+35 ASPI** para aspiração de trombos

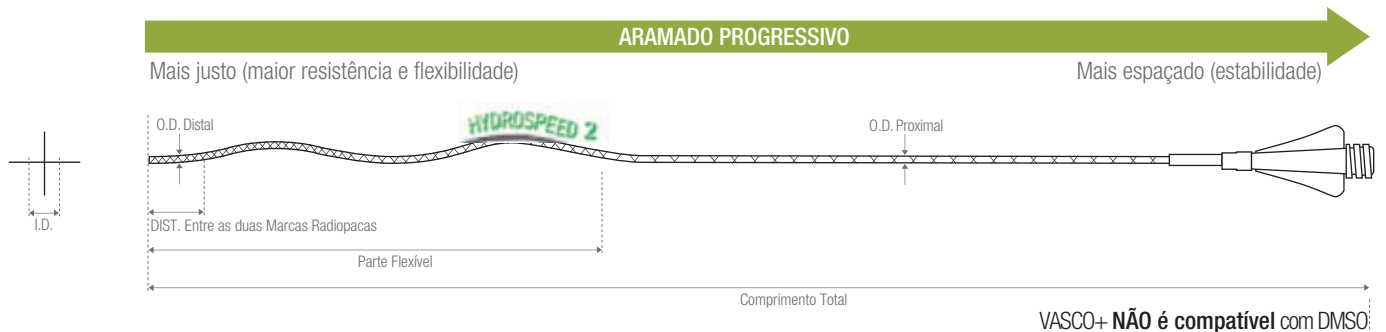

VASCO+ NÃO é compatível com DMSO

REFERÊNCIA	DIÂMETRO INTERNO (ID)	DIÂMETRO EXTERNO (OD) DISTAL X PROXIMAL	COMPRIMENTO TOTAL (CM)	MICROGUIA MÁXIMA RECOMENDADA	Nº DE MARCAS RADIOPACAS (DISTÂNCIA)
VASCO+10 (D-MP-COB)	0.42 mm (.017")	1.9F x 2.2F	155	.014 "	2 (30 mm)
VASCO+18 (D-MP-COB)	0.52 mm (.021")	2.1F x 2.7F		.018 "	
VASCO+21 (D-MP-COB)	0.60 mm (.024")	2.4F x 2.7F		.021 "	
VASCO+25 (D-MP-COB)	0.74 mm (.029")	3.0F x 3.3F		.025 "	
VASCO+28 (D-MP-COB)	0.82 mm (.032")	3.3F x 3.4F		.028 "	
VASCO+35 (D-MP-COB)	1.02 mm (.040")	3.8F x 4.0F	135	.035"	1
VASCO+35ASPI (D-MP)		5.1F x 5.1F	140		

Distribuído por:



R. Sampaio Viana, nº 202 - 10º andar - Cj. 103 - Paraíso
 CEP 04004-000 - São Paulo - SP - Brasil
 Fone: (11) 2125-8900 - Fax: (11) 3889-8135
 www.cmsmedical.com.br
 Informações Técnicas: neuro@cmsmedical.com.br

D = reta

MP = Multi purpose

COB = COBRA

